



كيفية استخدام الاختبار الذاتي لـ كوفيد-19

هناك خمس مجموعات اختبار في كل علبة تحصل عليها من بلدية كريستيانساند. الشركة المصنعة للاختبارات هي روش Roche

01 الاستعدادات

- اغسل يديك بالماء والصابون، أو استخدم مطهرًا كحولياً.

02 قم بتحضير وإجراء الاختبار

- افتح العبوة محكمة الغلق المميزة بعلامة '2'، قم بإخراج السدادة وأحد الأنابيب التي تحتوي على المحلول.
- افتح الأنبوب وضعه بحذر على حامل الأنبوب.
- انزع غلاف عبوة المسحة وأخرج المسحة دون لمس الطرف المصنوع من نسيج ناعم.
- قم بإمالة رأسك للخلف قليلاً وأدخل المسحة بعمق 2 سم تقريباً في داخل كل منخر، لا يلزم استخدام القوة.
- قم بتدوير المسحة في كلتا فتحتي الأنف لمدة 15 ثانية تقريباً في المجموع. من المهم أن تلامس المسحة جدار الأنف بشكل جيد، لكن لا يلزم استخدام القوة.
- عند الانتهاء، ضع مسحة الاختبار في الأنبوب البلاستيكي وحركها في حركة دائرية حوالي عشر مرات.
- ثم اضغط بيدك حول الجزء السفلي من الأنبوب البلاستيكي معتصراً المسحة أثناء سحبها لأعلى برفق. تخلص من المسحة.
- ضع السدادة على الأنبوب البلاستيكي وضع الأنبوب البلاستيكي على حامل الأنبوب.


03 إجراء القياس

- افتح إحدى العبوات المحكمة الغلق التي تحمل علامة '1' وقم بإخراج شريط الاختبار.
- قم بتنقيط أربع قطرات في الجزء الدائري من شريط الاختبار (وليس في نافذة النتائج المربعة الشكل).
- انتظر لمدة 15-30 دقيقة.


04 قراءة النتيجة

- ظهور خط واحد على 'C' يعني إجابة سلبية (A)
- إذا ظهر خط على كل من 'C' و 'T'، تكون نتيجة الاختبار إيجابية (B)
- على الرغم من أن الخطوط قد تبدو باهتة، إلا أنها صالحة. انظر الصور أدناه.


إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية - اتصل بمركز كورونا على رقم الهاتف 41 90 80 94 وأبلغهم بالنتيجة في أسرع وقت ممكن.

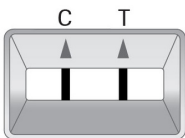

نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية (B)

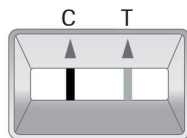

نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية (A)

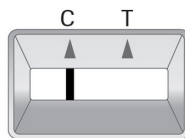

فيلم يظهر كيفية إجراء الاختبار الذاتي.